

---

# Uppdatering av användarmanualen

## RAM190A

---

---

ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80,  
Pentra 400, ABC Vet  
Byte av tonerkassett och trumenhet i OKI B4200



Observera ändringarna på följande sidor. Stryk berörda avsnitt i användarmanualen innan det här tillägget infogas i början av användarmanualen.

Datum: 21/3/05

## Byte av tonerkassett och trumenhet i OKI B4200

Tabell1-1: Berörda avsnitt i manualen

Avsnitt	Sida	Stycke	Ändrat objekt
Bilaga		Nya rutiner för skrivaren	Byte av toner och trumenhet

### 1. Byte av tonerkassett

#### 1.1. Information om tonerkassetten

- ◆ Tonerkassetten räcker olika länge beroende på svärtningsgraden, dvs. hur stor procentandel av sidan som täcks av utskrift. Svärtningsgraden är normalt 3–5 % för ett brev; bilder har ofta högre svärtningsgrad. Ju högre svärtningsgrad, desto snabbare förbrukas tonerkassetten. Om svärtningsgraden är 5 % räcker en standardtonerkassett till ca 2 500 sidor. Observera att siffran är ungefärlig; det faktiska antalet kan variera.
- ◆ Den första tonerkassett som installeras i en ny skrivare måste fylla fototrummans behållare och mätta framkallningsrullen med toner. Den första standardtonerkassett som installeras räcker normalt till ca 1 000 sidor.

#### 1.2. När ska tonerkassetten bytas?

Det är dags att byta tonerkassett när felindikatorn (4) blinkar långsamt. När Toner Low visas skrivs ytterligare 100 sidor ut innan utskriften avbryts. Utskriften startar på nytt när en ny tonerkassett har installerats. Tonernivån kontrolleras på följande sätt:

1. Tryck på knappen (5) så slocknar indikatorn (2).
2. Tryck på knappen (5) i mellan 2 och 5 sekunder.
3. Indikatorn (2) blinkar och 3 statussidor skrivs ut.

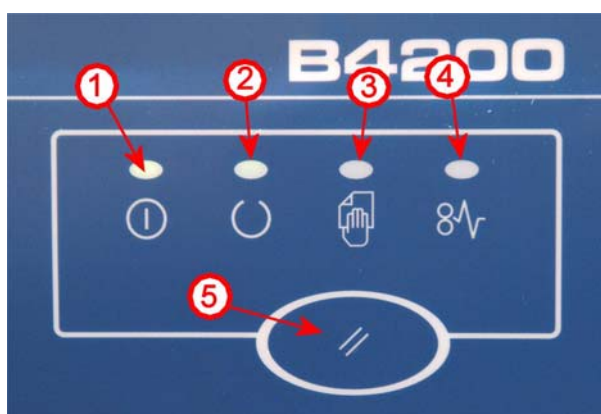


Bild1-1: Indikatorlampa och knapp för skrivarkommandon

4. Kontrollera tonerkassetts nivån i % på statussidan 2.

### MenuMap

Printer Serial Number: Printer Asset Number:  
CU version : A4.06 [ I00.92 S2.3.2c B01.33e 163 00000000 00000000 00000000 F32 ]  
PU version : 00.01.42 [ P102.08 ]  
PCL Program version : 01.54  
Total Memory Size : 8 MB  
OEL LCD:T1

USAGE MENU  
DRUM LIFE  
TONER

REMAINING 92 %  
2.5K = 06 %

Bild1-2: Status för toner och trumma

- När en ny tonerkassett sätts in ändras procenttalet till 100 %.

## 1.3. Byta tonerkassett

Du rekommenderas att rengöra lampan samtidigt som du byter tonerkassetten. Den toner som används i skrivaren består av ett mycket fint pulver. Ta fram en bit papper som du kan ställa den förbrukade kassetten på medan du installerar den nya. Lägg den förbrukade kassetten i den nya kassetten förpackning innan du kastar den. Följ alla gällande regler, rekommendationer osv. som gäller avfallshantering och återvinning. Borsta försiktigt bort eventuellt tonerpulver som spillt ut. Om det inte räcker ska en trasa fuktad med kallt vatten användas för att avlägsna spill. Använd inte varmt vatten och inte heller något lösningsmedel. Då går fläckarna aldrig bort.



**Om du råkar inhalera toner eller om du får toner i ögonen ska du dricka lite vatten respektive skölja ögonen i rikligt med kallt vatten. Kontakta därefter omedelbart läkare.**

Stäng av skrivaren och låt fixeringsenheten kallna i ca 10 minuter innan du öppnar det övre locket.

1. Tryck på öppningsknappen till det övre locket och öppna locket helt.



**Om skrivaren har varit påslagen kan fixeringsenheten vara mycket varm. Det heta området är tydligt markerat. Vidrör inte området.**

2. Stäng kassetten genom att dra den färgade spaken på höger sida om tonerkassetten mot skrivarens framsida och lyft därefter ut den förbrukade tonerkassetten.
3. Följ installationsanvisningarna som finns på eller inuti förpackningen till den nya tonerkassetten.
4. Torka varsamt av lampans yta med den linsrengörare som medföljer tonerkassetten, eller använd en mjuk tygbit.
5. Stäng det övre locket och tryck till så att låsspärren klickar.

## 2. Byta trumenhet

### 2.1. Fototrummans livslängd

Fototrummans livslängd är beroende av en rad olika faktorer, bl.a. temperatur och luftfuktighet, vilken typ av papper som används och antalet ark per utskriftsjobb. Fototrumman bör räckta till ca 25 000 sidor kontinuerlig utskrift. Siffran är ungefärlig eftersom omständigheterna varierar: antalet sidor som skrivs ut vid ett och samma tillfälle, miljöförhållanden och vilken papperstyp som används.

### 2.2. När ska fototrumman bytas ut?

När fototrumman har nått 90 % av sin livslängd blinkar felindikatorn långsamt och visar att fototrumman behöver bytas ut. Byt fototrumma när utskrifterna börjar bli svaga eller försämrade. Kontrollera trummans status på samma sätt som tonerns status.

### 2.3. Byta fototrumma

Du rekommenderas att byta tonerkassett och rengöra lampan samtidigt som du byter fototrumma.



**Den gröna ytan på fototrumman vid kassetten nedre del är mycket ömtålig och ljuskänslig. Vidrör den inte och utsätt den inte för normal inomhusbelysning i mer än 5 minuter. Om trumenheten behöver förvaras utanför skrivaren längre tid än så, ska enheten läggas i en svart platsäck så att den inte utsätts för ljus. Utsätt aldrig trumman för direkt solljus eller stark inomhusbelysning. Fatta alltid tag i trumenhetens sidor eller i ovandelen när du ska lyfta den.**

1. Tryck på öppningsknappen till det övre locket och öppna locket helt.



**Om skrivaren har varit påslagen kan fixeringsenheten vara mycket varm. Det heta området är tydligt markerat. Vidrör inte området.**

2. Ta ut den förbrukade fototrumman och den förbrukade tonerkassetten. Följ installationsanvisningarna som finns på eller inuti förpackningen till den nya fototrumman.
3. Torka varsamt av lampans yta med den linsrengörare som medföljer tonerkassetten, eller använd en mjuk tygbit. Följ installationsanvisningarna som finns på eller inuti förpackningen till den nya tonerkassetten.
4. Stäng det övre locket och tryck till så att låsspärren klickar.

### 2.4. Nollställa trummans räkneverk

När du har installerat fototrumman nollställer du dess räkneverk så att du kan hålla räkningen på antalet sidor som skrivs ut.

1. Stäng av skrivaren. Öppna skrivarens lock.
2. Slå på skrivaren genom att trycka på knappen (5).
3. Stäng skrivarens lock och kontrollera att räknaren visar 99 %.