

## Utilizarea prevăzută

Destinat utilizării ca standard pentru microproteine pentru standardizarea sau calibrarea procedurilor cu roșu de pirogalol pentru microproteine. **Rx Only**

## Rezumat și explicare

Standardul pentru microproteine este preparat din albumină bovină într-o soluție apoasă. Standardul oferă un nivel de concentrație a microproteinelor în intervalul de linearitate al procedurii roșu de pirogalol. Stabilizatori și conservanți adăugați.

## Principiul

Standardul trebuie utilizat pentru calibrarea determinării specimenelor necunoscute cu un test de microproteine cu roșu de pirogalol. Trebuie incluse soluții de control pentru a valida calibrarea testului.

## Ingrediente

Ingrediente reactive: Soluție de microproteine preparată din albumină bovină într-o soluție apoasă. Conservanți adăugați. Consultați eticheta pentru concentrația atribuită pentru standard.

Precauții: Pentru diagnostic *in vitro*. Manipulați cu aceleași măsuri de precauție utilizate pentru probele umane.

## Depozitare și stabilitate

Depozitați la 2-8°C. Dacă este închis etan și depozitat la 2-8°C, este stabil până la data de expirare.

## Prepararea

Standardul este furnizat sub formă de lichid gata de utilizare.

## Procedură

Standardul trebuie utilizat pentru standardizarea instrumentului sau testului, urmând instrucțiunile furnizate împreună cu instrumentul și setul de reactivi folosit.

Materiale furnizate: Soluție apoasă de microproteine 50 mg/dL.









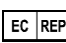
Materiale nefurnizate: Reactiv Pointe roșu de pirogalol pentru microproteine și soluții de control.






Limitări: Factorii care pot provoca rezultate incorecte sunt pipetarea necorespunzătoare și amestecarea necorespunzătoare.

## Valoare standard

Valoarea este 50 mg/dL când se utilizează cu procedura Pointe roșu de pirogalol pentru microproteine.

## Legendă simboluri

 A se utiliza până la (AAAA-LL-ZZ)	 Cod lot și serie
 Număr catalog	 Producător
 Dispozitiv medical pentru diagnostic <i>in vitro</i>	 Limită de temperatură
 Consultați instrucțiunile de utilizare	
Rx Only: Numai pentru utilizare pe bază de prescripție medicală	
 Marcaj CE	 Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

 P7582-STD	 Produs de HORIBA Instruments Incorporated 5449 Research Drive Canton, MI 48188		 2°C - 8°C	
---	--	---	--	---

Produs de HORIBA Instruments Incorporated: Pointe Brand  
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Reprezentant autorizat în Europa:

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Bruxelles, BELGIA

Tel: (32)2.732.59.54 Fax: (32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



## Certificat pentru efectuarea reactivilor

Reactivii Pointe sunt certificați ca fiind fabricați în conformitate cu parametrii specificați. Orice produs reactiv Pointe care nu îndeplinește specificațiile prin data de expirare indicată va fi remediat imediat fără niciun cost suplimentar.